

## KOMPLET {SIX PACK}

### 1. Jak działa urządzenie?

Komplet {Six Pack} wykorzystuje prąd o niskim natężeniu, aby wywołać skurcze mięśni i zapewnia delikatny masaż lub efekt wzmocnienia mięśni:

- Rozluźnienie spiętych mięśni ramion, pleców i talii
- Poprawienie napięcia mięśni
- Masaż

### 2. Specyfikacje:

Napięcie:	Bateria alkaliczna 1,5 V AAAx2EA
Tryby pracy:	A-F (6 trybów)
Częstotliwość:	1 ~ 100 Hz
Czas trwania programu:	12 minut
Prąd wyjściowy:	Maks. 9,8 mA
Wymiary:	21x10x2,3 cm
Waga:	57,4 g

### 3. Cechy produktu:

#### 3.1. Terapia niskoczęstotliwościowa

Przy użyciu energii elektrycznej urządzenie wytwarza impuls o niskiej częstotliwości, który ma pozytywny wpływ na organizm. Można ustawić intensywność według własnych upodobań. Niska częstotliwość oddziałuje na organizm delikatnie, podobnie jak masaż.

#### 3.2. Wybór z 6 programów

3.2.1. Wystarczy wybrać jeden z 6 trybów pracy

3.2.2. Program wyłącza się automatycznie po 12 minutach

### 4. Sposób użycia




**ON/INC:** włączanie / zwiększanie intensywności

**OFF/DEC:** wyłączenie / zmniejszanie intensywności

**PROGRAM:** przełączanie między programami

Wskaźniki trybu pracy:

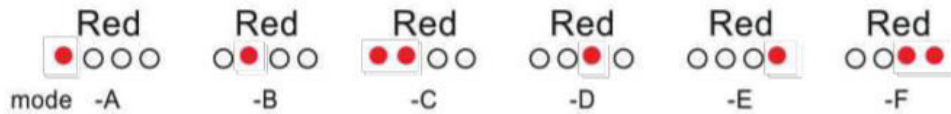

Po naciśnięciu przycisku „włączanie / zwiększanie intensywności” wskaźnik zaświeci silniej i odwrotnie, po naciśnięciu przycisku „wyłączanie / zmniejszanie intensywności” wskaźnik przygaśnie.

- Oba przyciski mają 10 poziomów
- Przełączanie między programami: należy wybrać spośród 6 trybów (A ~ F)
- Po wyczerpaniu baterii należy zdjąć pokrywę z komory baterii i wymienić baterię, a następnie ponownie założyć pokrywę.

#### 5. Sposób użycia kompletu {Six pack}

- Zawsze używać na czystej i suchej skórze
- Usunąć folię ochronną z nakładek żelowych
- Umieścić urządzenie na wybranej części ciała (brzuch, nogi, ramiona itp.)

**! NIE WŁĄCZAĆ URZĄDZENIA PRZED UMIESZCZENIEM GO NA CIELE.**

**! NIE NALEŻY DOTYKAĆ PRZYKLEJANYCH POWIERZCHNI, ABY ZAPOBIEC ZUŻYWIANIU SIĘ NAKŁADEK ŻELOWYCH.**

#### 6. Pierwsze użycie

- Wyjąć urządzenie z pudełka
- Umieścić urządzenie na wybranej części ciała
- Wybrać żądany program
- Dostosować intensywność
- Czas trwania programu wynosi 12 minut
- Kilkakrotnie nacisnąć przycisk wyłączenia, aż wskaźnik zgaśnie

Najlepiej używać urządzenia do 12 minut na raz, 2-3 razy dziennie. W przypadku dłuższego korzystania użytkownik może czuć się zmęczony.

Unikać korzystania z urządzenia 30 minut po posiłku; najlepiej używać urządzenia po kąpieli na czystej i suchej skórze

#### 7. Konserwacja

- Wyłączyć urządzenie po użyciu.
- Umieścić folię ochronną na nakładkach żelowych, aby zachowały swoją lepkość i pozostały czyste.

- Wyczyścić wszelkie zabrudzenia przy użyciu wilgotnej szmatki i delikatnego środka czyszczącego.
- Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepła, wilgoci, ognia, elektryczności itp.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.
- Jeśli nie korzysta się z urządzenia przez dłuższy czas, należy wyjąć baterię z kontrolera.

#### 8. Wymiana baterii

- Otworzyć pokrywę komory baterii
- Poprawnie włożyć baterię (zwrócić uwagę na + i -)
- Ponownie założyć pokrywę
- Włączyć urządzenie i sprawdzić, czy działa

#### PODSUMOWANIE:



1. Otworzyć komorę baterii



2. Włożyć baterie (2xAAA)



3. Podłączyć kontroler do jednostki



4. Zdjąć folię ochronną



5. Podłączyć kontroler do jednostki



6. Umieścić opaskę na ramieniu/nodze